



Voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode


Rite Aid Hydrogel producten geven verzachting bij tepelkloven en gevoelige tepels tijdens de borstvoedingsperiode. Ze geven direct verkoeling aan de huid. Hydrogel zorgt voor een ideale omgeving voor wondgenezing en het herstellen van het natuurlijke vochtgehalte van de huid zodat de borstvoeding kan worden gecontinueerd.

Wat het doet

- Verzacht bij gevoelige tepels en tepelkloven
- Helpt het herstel van de beschadigde huid
- Kalmeert de geïrriteerde huid
- Voorkomt dat beschadigde huid gaat schilferen

Gebruiksaanwijzing

- Was uw handen voor het gebruik van de discs
- Open de verpakking en verwijder de doorzichtige beschermfolie op de achterkant
- Plaats voorzichtig de gelkant op de aangedane huid
- Verwijder de disc voor de borstvoeding en leg deze op een schone onderlaag
- Was eventueel de tepels met handwarm water en dep deze droog voor de voeding
- Plaats de disc terug na de borstvoeding
- Vervang de disc dagelijks

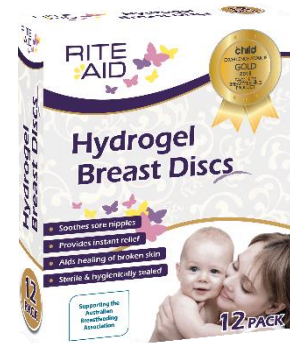

Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend zoals is aangegeven
- Buiten bereik van kinderen houden
- Laat tepelkloven en/of het vermoeden van een schimmelinfectie beoordelen door een professionele zorgverlener voordat u Rite Aid Hydrogel Discs toepast
- Neem contact op met een lactatiekundige of arts als u last heeft van tepelkloven, bloedende tepels of een brandend gevoel in de tepels



Algemeen

- Gebruik geen zeep of wasmiddelen om de discs schoon te maken
- Bewaar de discs op een koele, droge plek
- Voor een groter koelend effect kunnen de discs in de koelkast bewaard worden
- Een disc kan maximaal 24 uur gebruikt worden
- Vervang de disc als deze troebel is of verzadigd is met moedermelk



Geïmporteerd door
BABY&BORST B.V.
Palmpolstraat 70
1327 CH Almere
www.babyenborst.nl
036-5361600